


tapered tissue level

ティッシュレベルインプラント





BioHorizons社のテーパードティッシュレベルインプラントは、粘膜貫通部に1.8mmのカラーが付与されている一回法のインプラントです。カラー部の2.0mmのLaser-Lokゾーンが上皮の下方移動を阻止し、結合組織の付着を促すことで、生物学的封鎖を創出します。

また、3.0mm径のインプラント体もラインアップしており、狭小なスペースに埋入が可能です。

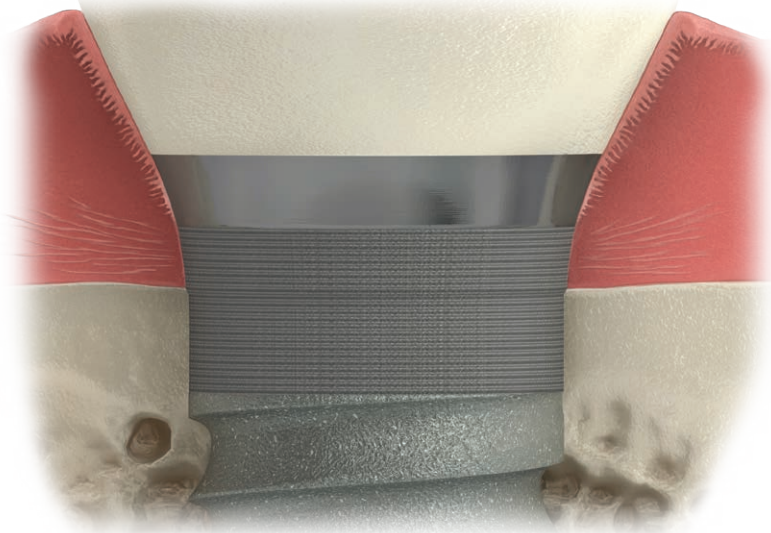

ティッシュレベルインプラントのラインアップ

				
インプラント体直径	3.0mm	3.8mm	4.6mm	5.8mm
補綴プラットフォーム直径	 3.5mm	 3.5mm	 4.5mm	 5.7mm
Laser-Lokゾーン	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
尖端の直径	2.0mm	2.8mm	3.1mm	3.9mm
カラー部の高さ	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm
ベベル部の高さ	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
カラー部の最大径	4.5mm	4.5mm	5.5mm	6.7mm
インプラント体の長さ	7.5mm	—	TTLY3807	TTLG4607
	9.0mm	—	TTLY3809	TTLG4609
	10.5mm	TTLY3010	TTLY3810	TTLG4610
	12.0mm	TTLY3012	TTLY3812	TTLG4612

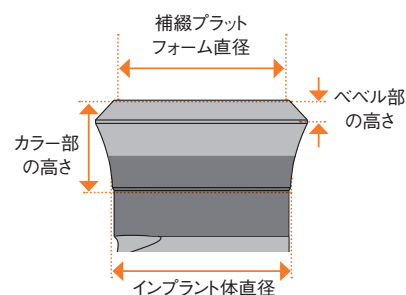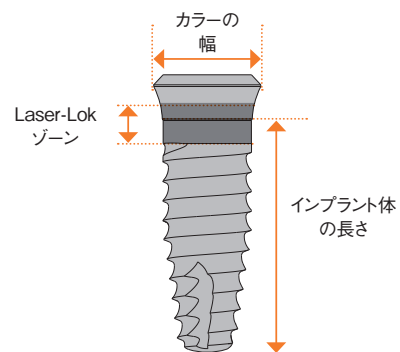


医療機器承認番号
22900BZX00343000
ティッシュレベルインプラントシステム

インプラント体表面はResorbable Blast Texturing (RBT)となっており、カラー部にはLaser-Lokが付与されています。

短時間の埋入と術野の見やすさを考慮したマウントフリータイプ。

カバーキャップ同梱。Titanium Alloy (Ti-6Al-4V)


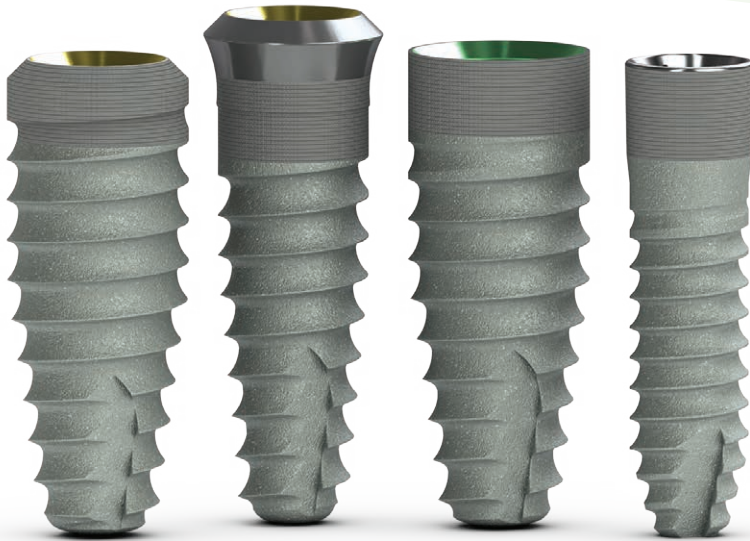


tapered
implant family

医療機器承認番号 22700BZX00017000 テーパードプラス
22700BZX00312000 テーパードレーザーロックインプラントシステム
22900BZX00343000 ティッシュレベルインプラントシステム

テーパードサージカルキットTSK4000

BioHorizons社のテーパードインプラントに共通して使用できるサージカルキット。術者が迷わず順番に器具を使用できるレイアウトです。ドリル・セクションは、インプラント体直径によりカラーコード化されているので、ドリルシークエンスが簡単にわかります。ドライバー・セクションは、補綴プラットフォーム直径によりカラーコード化されています。マッチするカラーをご使用ください。

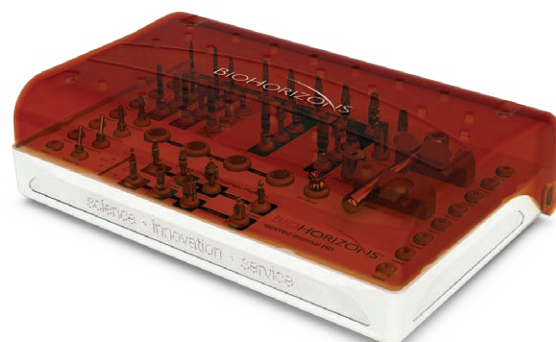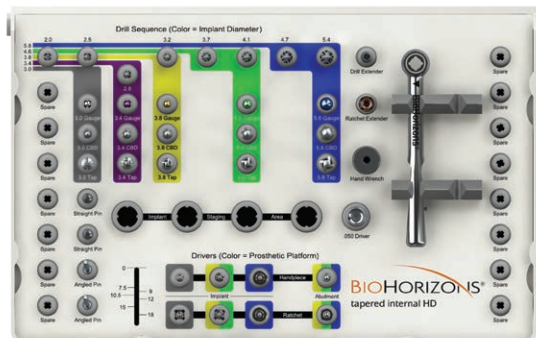

医療機器認証番号 229AGBZX00080000 サージカルキットTSK4000